



Die mobile und intuitive Vorlesekamera für Ihre Brille

Ein Fingerzeig genügt und OrCam liest Ihnen vor! OrCam ist eine intuitive Vorlesehilfe mit einer auf der Brille montierten kleinen Kamera, die Texte von bis zu 30 m Entfernung erkennt und dezent über den Hörknochen vorliest. Beim Spaziergang Straßenschilder und im Café die Speisekarte mittels Fingergeste vorlesen lassen – mit OrCam sind Sie mit einer Akkuladung über den Tag völlig unabhängig und Ihre Hände bleiben für Interaktionen frei. Wer eine klassische Bedienung bevorzugt, kann die Tasten der am Gürtel befestigten Bedieneinheit nutzen.

- Texte in Zeitungen, auf Verpackungen sowie Schilder und Plakate vorlesen
- leicht, mobil und dezent
- intuitive Bedienung über Fingergesten oder klassisch über Tasten
- Kamera für Nah- und Fernerkennung
- Akkulaufzeit: 24 Stunden im Standby und mind. 4 Stunden im Dauerbetrieb
- weitere Features von OrCam MyEye: Gesichts- und Produkterkennung

OrCam gibt es in zwei Modellen: die Standardausführung OrCam MyReader fokussiert sich auf die reine Texterkennung.

OrCam MyEye bietet aktuell eine Gesichts- und Produkterkennung als zusätzliche Features, die nicht nur für alltägliche Situationen nützlich sind, sondern Ihnen noch mehr Unabhängigkeit bieten.

Über das Mikrofon können Sie z. B. Personen und Produkten einen Namen geben. So erkennen Sie beim Einkaufen schneller Ihre Lieblingsmilch im Kühlregal und dass Ihre Nachbarin zufällig drei Meter weiter auch ihre Einkäufe erledigt. Auf der Bedieneinheit, die gleichzeitig Speicherplatz bietet, können bis zu 100 Personen und 150 Produkte gespeichert werden. Diese Funktionen sind selbst für gut Sehende als Erinnerungsstütze sehr praktisch. Weitere Features werden künftig über Updates angeboten.

Technische Daten

Bedienung:

- Intuitiv über Fingergesten oder über drei Bedientasten auf der Bedieneinheit

Kamera und Audio:

- Kamera mit 8 Megapixel mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon
- Nah- und Fernerkennung

Strom und Akkuversorgung:

- Akku (3700 mAh)
- Akkulaufzeit 24 h im Standby / mind. 4 h im Dauerbetrieb

Maße und Gewicht:


- Basiseinheit: 13,0 × 5,34 × 2,2 cm
- Kopfeinheit: 8,0 cm
- Insgesamt: 194 g

Anschlüsse:

- Lade- und Mikro-USB-Anschluss



OrCam liest Ihnen mit einer intuitiven Fingergeste den gewünschten Text vor.

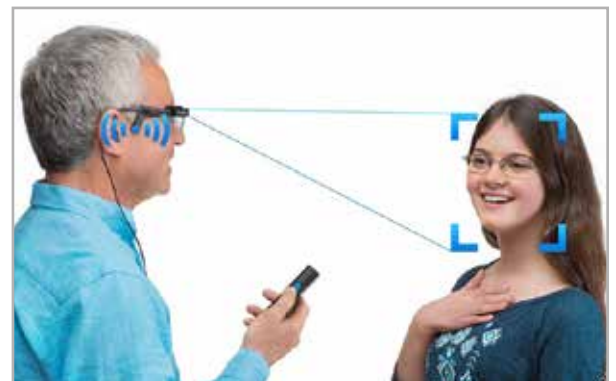

OrCam MyEye erkennt Personen innerhalb von 3 m und teilt den zuvor gespeicherten Namen mit.

Ansprechpartnerin:



Frau Basak Barca
Key Account OrCam
Tel.: 06223 4909-360
Mobil: 0162 2524-231
E-Mail: b.barca@baum.de

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de