



Die universellen portablen Full HD Bildschirmlesegeräte

Die mobilen Bildschirmlesegeräte VisioDesk und VisioBook HD sind leicht zusammenklappbar und können so einfach in einen anderen Raum getragen oder verstaut werden. Sie sind ideal für jeden, der Wert auf höchste Bildqualität legt, auch wenn die Platzverhältnisse beengt sind. Von der Kamera über die Signalverarbeitung bis zum Bildschirm arbeiten VisioDesk und VisioBook HD mit Full HD Auflösung. Beide Geräte zeichnen sich durch ein gestochen scharfes Bild, modernste Technik bei einfacher Bedienung, sehr ansprechendes Design und höchste Verarbeitungsqualität aus.

- leicht, tragbar und mobil
- in wenigen Sekunden betriebsbereit und verstaut
- beste Bildqualität dank Full HD Kamera, Signalverarbeitung und Bildschirm
- Full HD Kamera für Fern- und Nahbereich
- komfortabler 12,5 oder 15,6 Zoll Bildschirm
- mehr als 5 Stunden Akkulaufzeit
- einfache und intuitive Bedienung
- sehr modernes und zeitloses Design



Die idealen Begleiter für mobiles Arbeiten und Lesen

Flexibles Arbeiten von zuhause aus wie auch unterwegs, gepaart mit einer hohen Bildqualität und -vergrößerung: genau das bieten die Bildschirmlesegeräte VisioDesk und VisioBook HD. Kleine Textpassagen und Objekte lassen sich mit VisioDesk bis zu 40-fach und mit VisioBook HD bis zu 30-fach optimal vergrößern. Der Bildschirm bietet eine Full HD Auflösung und ermög-


licht neben der Echtfarbdarstellung kontrastverstärkende Farbkombinationen, zum Beispiel Gelb auf Schwarz. Wer möchte, gibt dem Bild mit der Bildoptimierungstaste und dem Autofokus noch den letzten Schliff.

Beide Bildschirmlesegeräte sind besonders leicht und intuitiv zu bedienen. Schnell können Sie die Kamera nach Ihren Wünschen drehen. Somit können VisioDesk und VisioBook HD nicht nur für den Nah- und Fernbereich eingesetzt, sondern auch als Vergrößerungsspiegel benutzt werden. Unabhängig vom Blickwinkel bietet Ihnen der Bildschirm eine gleichbleibende hohe Bildqualität.

Zusammenklappbar wie ein Laptop

Dank des ausgeklügeltem Klappsystems sind VisioDesk und VisioBook HD in Sekunden zusammengeklappt, somit leicht tragbar und benötigen wenig Stauraum. Ob in einer passenden Schublade oder in der mitgelieferten Tragetasche, VisioDesk und VisioBook HD passen sich Ihren Bedürfnissen an. Auch lässt sich der Bildschirm flexibel einstellen, sodass das Bild in einer optimalen Position zum Betrachter steht.

Mit mehr als 5 Stunden Akku-Laufzeit steht mobilem Arbeiten nichts mehr im Weg.

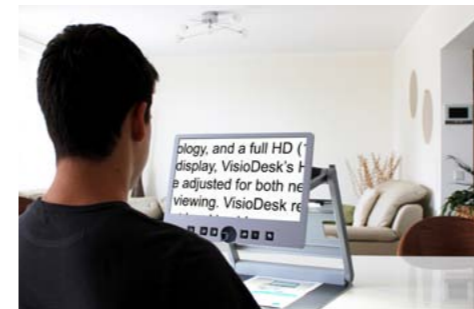

VisioDesk erlaubt den flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Orten.

VisioDesk

Das mobile Bildschirmlesegerät VisioDesk hat einen 15,6" Bildschirm und bietet seinem Anwender somit mehr Übersicht. Größere Dokumente und Bücher können daher einwandfrei erfasst und gelesen werden. Selbst kleinste Schriften und Unterlagen sind mit seiner bis zu 40-fachen Vergrößerung optimal lesbar.

VisioDesk ist trotz 15,6" Bildschirm kompakt und mit seinem Gewicht von ca. 4,8 kg gut zu tragen. Zudem kann es 5 Stunden netzunabhängig betrieben und in der mitgelieferten Tragetasche verstaut werden. VisioDesk ist somit für denjenigen Nutzer zu empfehlen, der Wert auf eine größere Bildschirmübersicht sowie -vergrößerung legt und im Gegensatz zu fixen Bildschirmlesegeräten die Möglichkeit haben möchte, den Arbeitsort gelegentlich ohne großen Aufwand zu wechseln.



VisioBook HD ist klein, leicht und handlich und ideal für einen mobilen Nutzer.

VisioBook HD

Das mobile Bildschirmlesegerät VisioBook HD mit ca. 3,6 kg leicht und zusammenklappbar wie ein Laptop. Dank seiner kleinen Größe passt auch VisioBook HD neben der mitgelieferten Tasche problemlos in eine Studententasche oder in eine passende Schublade. Es ist somit für den mobilen Nutzer konzipiert, der zwischen verschiedenen Arbeitsplätze gerne wechselt bzw. unterwegs ist und im Vergleich zu einer elektronischen Lupe mit einem größeren Bildschirm und mit freien Händen arbeiten möchte.

Insgesamt kann VisioBook HD 5 Stunden netzunabhängig betrieben werden. So können Sie es flexibel in verschiedenen Räumen zu Hause oder am Arbeitsplatz bedienen, in die Schule oder zu Freunden mitnehmen, in einer Bibliothek oder auch in der Bahn oder Flugzeug nutzen.



Technische Daten VisioDesk

Vergrößerung:

- 1,8- bis 40-fach, stufenlos

Darstellung:

- Echtfarbe und 14 kontrastverstärkende Farbkombinationen (positiv und negativ)

Bedienung:

- Bedienfeld mit 6 Tasten und Drehregler
- Autofokus (abschaltbar)
- Klappmechanismus mit drei Gelenken

Flachbildschirm und Kamera:

- 40 cm (15,6") 16:9 Breitbild-Monitor mit LED-Beleuchtung
- 1920 × 1080 Pixel, 60 Hz Darstellung
- Full HD Kamera für Nah- und Fernsicht

Strom- und Akkuversorgung:

- ca. 5 h Akkulaufzeit
- Universalnetzteil (100 - 240 V, 50 - 60 Hz)

Maße und Gewicht:

- 37,5 × 37,5 × 6 cm (zusammengeklappt)
- 37,5 × 37,5 × 35 - 60 cm (je nach Monitorhöhe)
- ca. 4,8 kg

Anschlüsse:

- USB 3.0-Ausgang (max. 1920 × 1080 Pixel, 60 Hz)
- HDMI (Ein- und Ausgang, 1920 × 1080 Pixel, 60 Hz)

Technische Daten VisioBook HD

Vergrößerung:

- 1,7- bis 30-fach, stufenlos

Darstellung:

- Echtfarbe und 14 kontrastverstärkende Farbkombinationen (positiv und negativ)

Bedienung:

- Bedienfeld mit 6 Tasten und Drehregler
- Autofokus (abschaltbar)
- Klappmechanismus mit drei Gelenken

Flachbildschirm und Kamera:

- 32 cm (12,5") 16:9 Breitbild-Monitor mit LED Beleuchtung
- 1920 × 1080 Pixel, 60 Hz Darstellung
- Full HD Kamera für Nah- und Fernsicht

Strom- und Akkuversorgung:

- ca. 5 h Akkulaufzeit
- Universalnetzteil (100 - 240 V, 50 - 60 Hz)

Maße und Gewicht:

- 34 × 31 × 5,4 cm (zusammengeklappt)
- 34 × 31 × 32 - 53 cm (je nach Monitorhöhe)
- ca. 3,6 kg

Anschlüsse:

- USB 3.0-Ausgang (max. 1920 × 1080 Pixel, 60 Hz)
- HDMI (Ein- und Ausgang, 1920 × 1080 Pixel, 60 Hz)